



# Harmony XL PRO

Special Edition

Odak • Esneklik • Özgürlük  
Bütünsel Yüz Harmonisi



## Harmony XL PRO

Harmony XL PRO, çeşitli estetik ihtiyaçlar için geliştirilmiş güçlü ve çok yönlü bir tedavi çözümüdür. 65'in üzerinde FDA onaylı endikasyonu ile geniş tedavi yelpazesi sunar. Kombine tedavilerin sinerjik etkisinden yararlanan Harmony XL PRO, günümüzün bütünsel ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarıyla uyumludur. Etkili ve gelişmiş sonuçları ile akıllı ve hasta merkezli tedavileri mümkün kılar.

## Kendi Harmoninizi Yaratın!

### Bütünsel ve Kişisel Tedaviler Daha İyi Sonuçlar Demektir...

Harmony XL PRO tam bir estetik harmoni oluşturarak, kliniğinizin üretkenliğini en üst düzeye çıkaran kombine tedavilerle çalışmanıza olanak tanır.

Çeşitli hasta taleplerine cevap verebilmek için istendiğinde platforma farklı teknolojiler eklenerek, sistem geliştirilebilir. Farklı teknolojiler kullanan modüller, bağımsız veya aynı sistemde uyumlu bir şekilde birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu modüller sistem kullanıcılarına daha fazla esneklik kazandırır, iş verimini artırır ve duruma özel tedavi yapabilmek için siz profesyonellerin bilgisine güç katar. Günümüzde zaten birçok hekim farklı teknolojileri birleştirerek hastalarını tedavi ediyor. Teknolojileri tek bir sisteme entegre edip teknolojik kombinasyonlarla gücünüzü arttırabilirsiniz.





# Eksiksiz Yüz Harmonisi

Harmony XL PRO aşağıda yer alan tedaviler başta olmak üzere çok çeşitli endikasyonlar için güvenli ve etkili çözümler sağlar:

- ▲ Cilt Yenileme
- ▲ Cilt Tonu ve Dokusunu Düzenleme
- ▲ Pigmente Lezyonlar
- ▲ Vasküler Lezyonlar
- ▲ Skar Tedavisi
- ▲ Akne Tedavisi
- ▲ Dövme Silme
- ▲ Cilt Gençleştirme

# Harmony XL Pro Lider Aplikatörleri

## Q-Switch Nd:YAG 1064 nm

### ClearLift™

Alma'nın ödüllü ClearLift™ aplikatörü, günümüzde mevcut olan en kapsamlı Q-Switch Nd:YAG tedavi çözümüdür. Tek bir lazer modülü, tüm cilt tipleri için birçok endikasyonu tedavi eder.



### Optimal Sonuçlar için Maksimum Güç

ClearLift™, hedef alana yoğun nanosaniye lazer darbeleri ileterek foto akustik bir etki yaratır.

Yüksek yoğunlukta Q-Switch lazer, derin bir mekanik etki sağlar. Bu mekanik etki, dövmelemleri ve hiperpigmentasyonu gidermede oldukça etkilidir.


Piksel uçları ile oluşturulan kontrollü dermal hasar ise yüz, boyun ve dekolte de cilt gençleştirme için ideal çözüm sunar.

### Endikasyonlar:

Elastikiyet Kaybı ve Kırışıklık Dahil Total Cilt Gençleştirme, Melazma, Benin Pigmente Lezyonlar, Dövme Silme

**Alma ClearLift™, fraksiyonel Q-Switch lazer olmanın avantajı ile çeşitli derece ve derinliklerdeki pigmente lezyonların tedavisinde oldukça etkili sonuçlar almamı sağlıyor.**

Dr. Pablo Naranjo MD, PhD, NISA Hastanesi Elit Lazer Kliniği ve Lazer Biriminin Tıbbi Direktörü, Madrid, İspanya

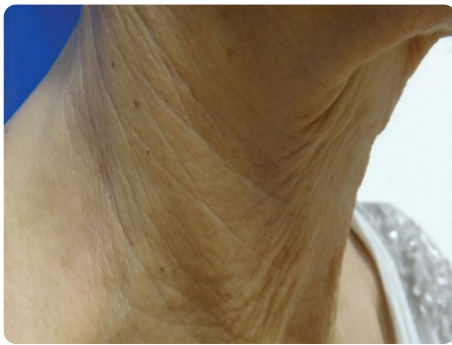

Önce



Sonra

Alma Klinik Departmanı

## Dye-VL PRO

Alma'nın dar bant spektrumlu patentli AFT™ teknolojisi, vasküler ve pigmente lezyonların özel tedavisi için geliştirilmiştir. 500-600 nm bant spektrumu, hemoglobün emilimi için optimal aralıktır ve dolayısıyla vasküler lezyonları hedef alarak etkili bir şekilde tedavi eder. Melanin tarafından yüksek oranda absorbe edilmesi ile de lekelerin ve pigmentasyonun giderilmesinde etkili olur.


Dye-VL modülü, IPL teknolojisinin gelişmiş bir şekli olan patentli AFT™ teknolojisi kullanır. Bu teknoloji, enerjinin kontrolsüz zirve gücünü önlediğinden yan etkisi riski minimuma iner. Verimli enerji kullanımı, daha fazla güvenlik ve daha etkili sonuçlar verir. Yeni ve gelişmiş Dye-VL PRO soğutmalı aplikatör oldukça güçlü ve etkilidir. Atımlarla eş zamanlı kontakt soğutma, cildi uygulama esnasında soğutur ve tedavi konforunu artırır. Odaklanmış 3 cm<sup>2</sup> spot boyutu, yüksek tepe gücü ve yoğun soğutma ile etkili klinik sonuçlar sağlar.



### Endikasyonlar:

Vasküler Lezyonlar (Rozasea, Port Wine, Hemanjiom, Anjioma, Telenjektazi, Spider Ven vs)

Pigmente Lezyonlar (Güneş ve Yaşlılık Lekeleri, Çiller, Melazma, PIH vs)

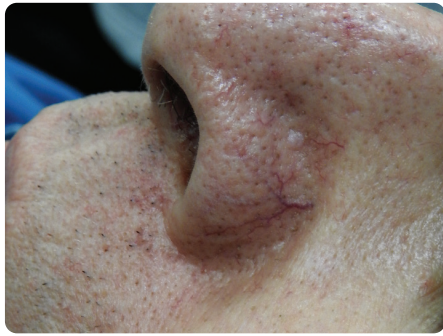

Önce



Sonra

Alma Klinik Departmanı

## Pixel Er:YAG 2940 nm

Pixel Er:YAG modülü, 2940 nm dalga boyu kullanarak etkili fraksiyonel cilt yenileme sağlar. Aplikatör genel cilt tonunu, elastikiyetini ve dokusunu iyileştirir, yüzeysel pigmentasyonu ve genişlemiş gözenekleri küçültür. Fraksiyonel Er:YAG 2940 lazerin tedavi mekanizması, daha hızlı iyileşme ve doku rejenerasyonu için hızlandırılmış yeniden epitelizasyonu destekler.

### Endikasyonlar:

Cilt Yenileme, Skar Tedavisi



Önce



Sonra

*Dr. Carlos Marise Pergamino, Arjantin*

## Er:Glass 1540 nm

### ClearSkin PRO

ClearSkin aplikatörü, akne vulgarisi güvenli ve etkili bir şekilde tedavi etmek için ablatif olmayan bir lazeri eşzamanlı kontakt soğutma ve vakum teknolojisiyle birleştiren ilk teknolojidir. Ablatif olmayan Er:Glass 1540 nm lazer, cilde derinlemesine nüfuz ederek yağ bezlerinde termal hasara neden olur ve P. Acnes bakterilerini yok eder, sebum üretimini azaltır. Entegre vakum mekanizması da gözeneklerde birikmiş fazla yağı çeker. Kontakt soğutma cildi korur, daha güvenli bir tedaviye olanak tanır.

### Endikasyonlar:

Cilt Gençleştirme, Akne, Akne Skarları ve Benin Lezyonlar





## Long Pulse Nd:YAG 1064nm

Kontakt soğutmaya sahip LP Nd:YAG lazer, vasküler lezyonları ve damarları tedavi etmek için güçlü bir çözüm sunar. 1064 nm dalga boyu, derin penetrasyon özelliği ve uzatılmış darbe süresi ile daha kısa dalga boyları tarafından hedeflenemeyen derin lezyonların tedavisi için ideal bir çözümdür. Aplikatör, cilt altındaki damarların görüntülenmesini kolaylaştıran bir ışık kılavuzu ile açık açılı bir tasarıma sahiptir. Aplikatör ucuna entegre edilen eşzamanlı kontakt soğutma teknolojisi, tedavi sırasında cildi soğutarak yan etki riskini en aza indirir ve hastalar için daha konforlu bir tedavi sağlar.

### Endikasyonlar:

Vasküler Lezyonlar,  
Yüz ve Bacak Telenjiektazileri,  
Cherry Hemanjiom



Önce



Sonra

*Dr. Nilda Barman, Dr. Salvador Abdo, Buenos Aires, Arjantin*

## Kombine Tedavilerin Gücü

Harmony XL PRO, kombine protokollerin kullanımına olanak tanıyarak daha etkili klinik sonuçlar alınmasını sağlar. Bu bütünsel yaklaşım sadece daha etkili olmakla kalmaz, aynı zamanda hastaların ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş profesyonel bir yaklaşım sağlar. Güçlü kombinasyonlar sayesinde tıbbi deneyimlerinizi sürekli olarak güncelleyip, farklı endikasyonlar için özel çözümler geliştirebilirsiniz.



Önce



Sonra

*Prof. Ganesh Pai, MD, Medikal Direktör DERMA-CARE Cilt & Kozmetoloji Merkezi,  
Mangalore, Hindistan*



# Harmony XL PRO

Special Edition

**Güçlü Teknoloji · Etkili Sonuçlar**



Çoklu Tedavi Platformu



65'in üzerinde FDA onaylı endikasyon



Daha etkili sonuçlar için kombine tedaviler



İstendiğinde farklı teknolojiler eklenerek sistemi geliştirebilme



**STS**  
ESTETİK LAZER SİSTEMLERİ

[www.stslazer.com](http://www.stslazer.com)

