


KANITLANMIŞ KLİNİK ETKİNLİK

Infini teknolojiyi destekleyen çalışmalarda klinik olarak kanıtlanmıştır. Derinlikten bağımsız olarak güven duyabileceğiniz sonuçlar sağlayan tutarlı koagülasyon alanları oluşturabileceğinize güvenebilirsiniz.



Tüm derinlikler 10 ms boyunca 4. Seviyede tedavi edilmiştir.
DR., Dermatolog SB Cha, Yonsei Üniversitesi, Güney Kore'nin izniyle

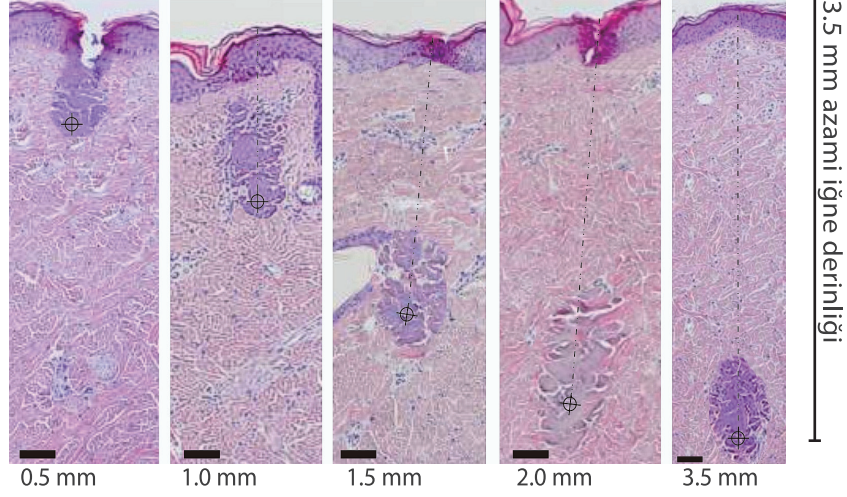

LUTRONIC

INFINI

Yüksek Yoğunluk Odaklı RF

3D HACİMLEŞTİRME
İLE ZAMANI TERSİNE
DÖNDÜRÜN

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sistem Tipi	Bipolar RF (Radyo frekans)
Frekans	1 MHz
Total RF Tedavi Seviyesi	20. Seviyeye kadar
Çalıştırma Modu	Mikro İğneli Fraksiyonel RF (MFR) Superfasiyal Fraksiyonel RF (SFR)
Tedavi Süresi (Zaman)	10 ms - 1,000 ms
Uçlar	MFR : Mikro iğneli elektrotlar, 3.5 mm'ye kadar (ayarlanabilir derinlik) SFR : 144 pine kadar
Ekran	Renkli Dokunmatik LCD (Toplam Atış Sayısı Görüntülenir)
Çift Switch	Ayak ve Parmak Switchi
Ağırlık	28 kg
Boyutlar	362 mm (W) x 409 mm (L) x 1713 mm (H)

STS
Estetik Lazer Sistemleri

Caferağa Mah.
Moda Mektebi Sok.
No: 4/9 Moda
Kadıköy / İstanbul
Tel.: +90 216 428 30 67
+90 216 428 30 68
Fax: +90 216 428 60 67

Lutronic Corporation
Lutronic Center, 219 Sowon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, KOREA
TEL. +82 31 908 3440 / FAX. +82 1600 3660
e-mail. office@lutronic.com

Lutronic Inc.
1 North Avenue, Unit C, Burlington, MA 01803, USA
TEL. +1 888 588 7644

Lutronic Japan Co., Ltd.
9F Hakataekimae Center Bldg., 1-14-16 Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka city,
Fukuoka-pref., 812-0011, JAPAN
TEL. +81 92 477 2755 / FAX. +81 92 477 2756

LUTRONIC

Artık Tüm Cilt Tiplerini Güvenle Tedavi Edebilirsiniz... Yıl Boyunca

YÜKSEK YOĞUNLUK ODAKLI RF

LUTRONIC INFİNİ yaşlanma, pigmentlenmenin eşlik ettiği cilt sarkması, kırışık ve laksite de hedeflenmiş ve sağlam koagülasyon alanlarının oluşturulması için yüksek yoğunluk odaklı bir RF çözümdür. Tedavi derinliği ve enerji seviyeleri üzerindeki tam kontrol, hastanın cilt tipi veya bronz tenli olmasından bağımsız olarak gerçek manada özelleştirilmiş tedaviler için çok katmanlı hedeflenmiş bir yaklaşımı mümkün kılmaktadır. Artık yıl boyunca hastalarınızın taleplerini karşılayan en iyi çözümü sağlayabilirsiniz.

BENZERSİZ TEKNOLOJİ, ŞAŞIRTICI SONUÇLAR

Infiniti'nin kanıtlanmış ve etkileyici tasarımı cilde hacim kazandırmak için 3 boyutlu enerji taşıması yoluyla arttırılmış kırışık azaltılması sağlar. Altın kaplı mikro iğneler ile sağlanan yüksek Yoğunluk Odaklı RF dermisin spesifik bir katmanı içerisinde kesin ve kontrol edilebilir fraksiyonlu koagülasyon alanları oluşturur. Ayarlanabilir derinlik kontrolü hassas alanların özelleştirilmiş ve tekrarlanabilir tedavisine imkan verir. Infiniti koyu cil tiplerinde PIH riskini etkin şekilde düşürmekte ve melazması ve diğer tipteki pigmentli lezyonları bulunan hastalarda emniyetli şekilde kullanılabilir. Lutronic'in patentli ComfortFlow teknolojisi konforu ve hasta memnuniyetini maksimize eder.

NEDEN INFİNİ?

- Dünya genelinde satılan 600'den fazla cihazla kanıtlanmıştır.
- Kırışıkları düzleştirmek ve yaşlanmayı, cilt sarkmasını iyileştirmek için her tedavide binlerce hedeflenmiş koagülasyon alanı oluşturur.
- Mikro odaklı ultrasona göre daha az acı ve maliyetlidir.
- Diğer ablatif lazer tedavilerine göre daha geniş uygulama alanıyla daha etkilidir.
- Azami yatırım dönüşü için düşük maliyetli sarf malzemeleri
- Hızlı tedavi; 45 dakikalık tek bir seansta 50 binden fazla Termal Koagülasyon Noktası (TCP).
- Hızlı ve kolay geri gelme, CO2'de daha kısa devre dışı kalma süresi
- 2'si 1 arada genişleyebilen platform: MFR & SFR
- ELLE dergisinde 2015 yılını tanımlayan 9 Çığır Açıcı Güzellik Tedavisinden birisi olmuştur.
- FDA (USA) onaylı olması.

HEKİMLER NE DİYOR

"Sonunda! Mantıklı bir Radyofrekans Sistemi: Infiniti... güç seviyeleri ile maruz kalma süreleri arasındaki esnek denge ile birlikte alındığında yalıtımlı mikro iğne uçları ve değişken derinlikler yoluyla doğru enerji aktarımı kombinasyonuna sahip olup, bu durum Infiniti'yi ideal "RF Cilt Sıkılaştırıcı" haline getirmektedir. Dr. Steve Weiner, ABD

GÜVENEİLECEĞİNİZ SONUÇLAR



Dr. Matteo Tretti Clementoni, İtalya'nın izniyle



Dr. Steve Weiner, ABD'nin izniyle



Dr. Matteo Tretti Clementoni, İtalya'nın izniyle



Dr. Ivan Perez Haded, Kolombiya'nın izniyle



Dr. S. S. Savant, Hindistan izniyle



Dr. J. Sakhiya, Hindistan izniyle


ANA ENDİKASYONLAR

- Cilt Germe
- PERİÖRYAL KIRIŞIKLIKLAR
- Cilt Gençleştirme
- Gıdık ve Boyunda Sarkma
- Aktif İltihabi Sivilce
- Genişlemiş Gözenekler
- Sivilce Yarası
- Aşırı Sebum Sekresyonu
- Hiperhidroz/Osmidroz
- Esneme İzi


YENİLİKÇİ COMFORTFLOW TEKNOLOJİSİ



Yalıtımlı altın kaplı mikro iğneler

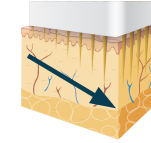

Yerleşik ComfortFlow teknolojisi, hızlı ve kolay iyileşme için hasta rahatsızlığını en aza indiren ardışık mikro iğne yerleştirilmesi yoluyla daha yumuşak penetrasyonu mümkün kılar.


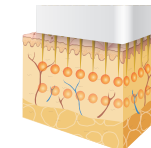


Ayarlanabilir derinlik kontrolü hassas alanlarda çoklu geçiş ve tedaviye izin verir.

SFR™ İÇİN BENZERSİZ ÇİFT KANAL




(Nazik cilt temasıyla RF)

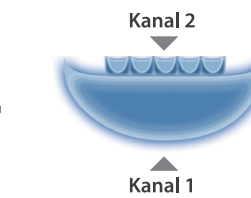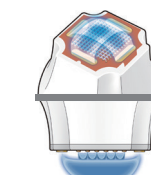

SFR'nin benzersiz çift kanallı sinerjistik etkiyle epidermis ve süperfasiyal dermise noninvazif şekilde RF enerjisi vererek parlak bir cilt ve kontrollü gerdirme sağlar.

İYİLEŞTİRİLMİŞ SONUÇLAR

Infiniti'nin tutarlı, eşit ısı dağıtımı daha tutarlı sonuçları ve iyileştirilmiş sonuçları getirir.

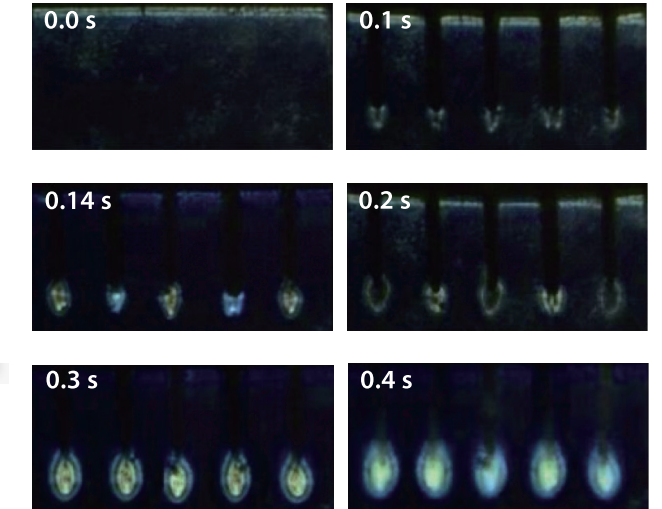

Mikro iğne izleri ve RF enerjisinin ısı ciltteki ısı dağılımı phantom modeli için 3.5 mm derinlikte 8. güç seviyesinde ve farklı maruz kalma süreleriyle (saniye olarak) gösterilmektedir. Görüntüler mikro iğneler geri çekildikten hemen sonra çekilmiştir.

PhD. Rudolf Verdaasdonk, PhD, ve arkadaşlarının izniyle Fysica en Medische Technologie (FMT) Vrije University, Amsterdam, Hollanda